

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ФИЗИОТЕРАПИИ

Для учреждений реабилитационного профиля



- + Оснащение согласно приказу № 788Н
- + Современный кабинет физиотерапии

Комбинированная терапия ■ Ударно-волновая терапия
Ингаляционная терапия ■ индуктотермия ■ УВЧ терапия
Глубокая осцилляция ■ Локальная криотерапия
Прессотерапия ■ Магнитотерапия

Более 25 лет в сфере реабилитации

REXAMED — прогресс в медицину

Компания REXAMED является представителем ведущих мировых производителей медицинского оборудования для физиотерапии. Мы также тесно сотрудничаем с Российскими и зарубежными брендами, чтобы предоставлять своим клиентам самые современные модели аппаратов на выгодных условиях.

Многолетний опыт в оснащении клиник, центров медицинской реабилитации, санаторно-курортных и спортивных объектов и ежедневное общение с врачами и специалистами здравоохранения помогает нам лучше понимать потребности учреждений и их клиентов.

Преимущества оборудования для физиотерапии от REXAMED:

- ∞ Оборудование подходит по приказам Министерства здравоохранения РФ для оснащения государственных медицинских учреждений.
- ∞ Аппараты классической физиотерапии, качество и срок службы которых проверены десятилетиями.
- ∞ Новые методики, которые расширяют спектр оказываемых услуг и открывают новые горизонты для развития частной практики.
- ∞ Модульные системы, чтобы начать работу с минимальными затратами и легко расширять возможности учреждения по мере роста спроса.
- ∞ Портативные аппараты для спортивных врачей и выездных специалистов.
- ∞ Системы с интуитивным управлением, готовыми протоколами терапии, анатомическими атласами и подсказками по зонам воздействия, созданные специально для начинающих врачей и младших специалистов.
- ∞ Методики, которые легко встроить в вашу повседневную работу, чтобы сделать ее легче и эффективнее.



Проектирование учреждений под ключ

Если вы только планируете открыть свой бизнес в сфере оздоровления, было бы ошибкой начинать с выбора оборудования. Для того чтобы обойти все подводные камни, сэкономить время и деньги, **мы предлагаем вам услугу комплексной разработки проекта**. Независимо, какого масштаба ваш проект — небольшой физиокабинет или целое отделение. Специалисты проектного отдела REXAMED помогут вам с этой задачей.



Содержание

Комбинированная терапия	03
Комбинированная терапия (УЗТ+ЭТ)	04
Ультразвуковая терапия	07
Лазерная терапия	07
Электротерапия	07
Winback-терапия	09
Тесар-терапия	10
Магнитотерапия	13
Экстракорпоральная магнитнотрансдукционная терапия (ЕМТТ®)	14
Высокочастотная магнитотерапия (ВИМТ)	15
Низкочастотная магнитотерапия	16
Ударно-волновая терапия	19
Радиальная УВТ	20
Сфокусированная УВТ	22
Прессотерапия	24
Глубокая осцилляция	25
УВЧ терапия и индуктотермия	25
Инфракрасная терапия	25
Микроволновая терапия (СМВ терапия)	26
Лазерная терапия	26
Локальная криотерапия	27
Ингаляционная терапия	28
Пневмовибрационный массаж	29

Физиотерапия от признанного
мирового лидера

Интеллектуальная терапия

Rexamed — официальный дистрибьютор Chattanooga в России

Мы являемся эксклюзивным дистрибьютором физиотерапевтического оборудования Chattanooga в России. Приобретая оборудование у официального представителя, вы получаете оригинальное оборудование и гарантийное обслуживание. Авторизованный у производителей сервисный центр имеет прямой контакт с инженерами Chattanooga для быстрой диагностики и решения даже самых сложных задач. Наличие собственного ремонтного цеха и склада запчастей позволяет сразу же начать ремонт или быстро заменить расходные материалы для ваших аппаратов.

Мы знаем, как для вас важно, чтобы оборудование всегда было на месте и готово к работе.

Узнайте больше про Chattanooga в России:
www.chattanooga.su

Chattanooga

Бренд «Chattanooga» входит в состав концерна DJO Global*, производителя всемирно известного оборудования для реабилитации, которое используется во всех сферах восстановительного лечения.

В течение 70 лет бренд «Chattanooga» удерживает лидерские позиции на мировом рынке физиотерапевтического оборудования. Продукция под этой торговой маркой используется в более чем 80 странах мира, а доля продаж составляет около 70% мирового оборота.

Chattanooga также сотрудничает с ведущими мировыми производителями, выбирая лучшие технологии, внедряет их в свои продукты, параллельно адаптируя их под потребности и нужды клиента. В результате на выходе получается уникальный с точки зрения удобства эксплуатации, надежности и функционала продукт.

Продукция Chattanooga способствует реабилитации после хирургических операций, травм или при дегенеративных заболеваниях, помогая пациентам восстанавливать или поддерживать естественные двигательные функции.



* DJO Global - мировой производитель медицинского оборудования.

Комбинированная терапия



Комбинированная терапия (УЗТ+ЭТ)
Ультразвуковая терапия
Электротерапия
Лазерная терапия

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАНИЯ:

- снятие мышечных спазмов;
- предотвращение или замедление атрофии, вызванной неподвижностью;
- усиление локального кровообращения;
- повторное обучение мышц;
- расширение диапазона движений;
- симптоматическое устранение и ослабление хронической боли;
- посттравматическая острая боль;
- ускорение регенерации нервной ткани, роста костей и заживления связок;
- острая боль после хирургических операций;
- глубинное лечебное прогревание для лечения некоторых подострых и хронических состояний;
- лечение ран.



ОПЦИОНАЛЬНЫЕ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ МОДУЛИ



Модуль
электротерапии
2-х канальный



Модуль
электротерапии
4-х канальный



Модуль
ультразвуковой
терапии



Модуль
лазерной
терапии



Модуль
вакуумной
электротерапии



Модуль
аккумуляторный

ВАРИАТИВНОСТЬ ВЫБОРА АППЛИКАТОРОВ И ЭЛЕКТРОДОВ



4 вида
ультразвуковых
аппликаторов



Электроды для
внутриполостной
электротерапии



Резиновые
электроды
различных
размеров



Тканевые
электроды
различных форм
и размеров



Вакуумные
электроды
различных
размеров



17 видов
лазерных
диодов
и матриц



Функционал аппаратов позволяет решать любые терапевтические задачи, а вариативность выбора комплектаций дает возможность подобрать аппарат для нужд любого ЛПУ с учетом его потребностей и бюджета.



- ## ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМ INTELECT ADVANCED:

УДОБСТВО РАБОТЫ С INTELECT ADVANCED



Проблемную
зону для
терапии

Симптом

Показание

Протокол
готов!

Способ размещения электродов

УНИКАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ INTELECT ADVANCED

EMG

S/D
кривая

ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ CHATTANOOGA ЭТО:



Надежные аппараты от лидера рынка физиотерапии, отвечающие всем международным стандартам качества.



Аппараты необходимой конфигурации от премиального бренда, по цене бюджетных импортных аналогов.




Невероятно удобные с точки зрения эксплуатации системы, что делает их самым популярными в мире.



Различные функции, повышающие эффективность процедур, а также готовые методики и протоколы терапии минимизируют возможные ошибки персонала.



Сертифицированная сервисная служба на любые виды технических работ и полное обучение правильной эксплуатации, а также гарантия от компании производителя.

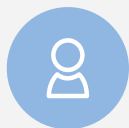

Для обслуживания нескольких систем Intellect достаточно одного специалиста, что позволяет сократить затраты на персонал.



Престиж и статус ЛПУ, а также его приобщение к международному сообществу DJO.



**2 года
гарантии**
от производителя



Intelect® Mobile Ultrasound



Основные преимущества:

- частота: 1 и 3 МГц;
- работа в импульсном и непрерывном режимах (10%, 20%, 50% и 100%);
- переменная частота рабочего цикла 16 Гц, 48 Гц или 100 Гц;
- **меню готовых клинических показаний** для определения наиболее оптимальных параметров использования;
- возможность внести в память устройства до **10 пользовательских протоколов**;
- коэффициент неоднородности луча **<6:1**;
- эргономичные звуковые **головки разных размеров (1 см², 2 см², 5 см², 10 см²)**;
- все звуковые головки взаимозаменяемы благодаря установленной на всех датчиках технологии **Electronic Signature™** (электронная подпись);
- функция подогрева звуковых головок и индикатор контакта излучателя.



Ультразвуковая терапия

Intelect® Mobile Laser



Основные преимущества:

- лазерная терапия с низким уровнем излучения **класса 3B**;
- независимое управление параметрами;
- работа в импульсном и непрерывном режимах;
- регулируемая частота следования импульсов;
- информация в реальном времени о количестве переданной энергии;
- меню готовых клинических показаний для лазерной терапии;
- возможность внести в память устройства до **15 пользовательских протоколов**;
- встроенное устройство поиска акупунктурных точек;
- **17 аппликаторов**, включая светодиодные, лазерные диоды и пучки.



Лазерная терапия

Intelect® Mobile Stim



Основные преимущества:

- **2 канала стимуляции**;
- независимая установка интенсивности и других параметров стимуляции по каждому каналу;
- 7 стандартных типов тока (**биполярный IFC, тетраполярный IFC, гальванический, импульсный ток высокого напряжения, микротоки, VMC и TENS**);
- возможность внести в память устройства до **15 пользовательских протоколов**;
- удобная транспортировка: малый вес аппарата, возможность питания от аккумулятора и специальная переносная сумка;
- инновационная конструкция позволяет устанавливать устройство на тележке, на поверхности стола, на стене, или использовать в качестве мобильного аппарата.



Электротерапия

Электротерапевтическая система нейромышечной стимуляции мышц неба, глотки и гортани с набором электродов для внутриглоточной стимуляции. Применяется для лечения и реабилитации пациентов с проблемами неврологических и травматических нарушений глотательного рефлекса и речевой функции.

VitalStim® терапия — это неинвазивная нейромышечная электростимуляционная терапия (НМЭС).

Терапевтический процесс проводится на мышцах в области лица и шеи. Комплекс небольшими электрическими разрядами стимулирует двигательные нервы, которые иннервируют мышцы лица и шеи. С прибором используются самоклеющиеся электроды. Анатомические иллюстрации и подробные видеоинструкции во встроенной памяти помогут быстро приступить к работе уже в первый сеанс нейромышечной электростимуляции.



Не имеет аналогов



ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ VITALSTIM:

Подключение к компьютеру, планшету или телефону по Bluetooth. Это позволит визуализировать процесс лечения.

Пациенты лучше понимают, чем занимаются, а вы руководите терапией и назначаете персонализированные упражнения.

Предустановленные программы терапии — используйте заранее разработанные комплексы упражнений или создайте собственный и сохраните его для каждого конкретного пациента.

Наличие внутренней памяти позволяет хранить статистику и количественно оценивать результаты лечения.

Преобразование электростимулов в звуки — улучшает опыт пациента и повышают мотивацию к лечению.

Визуализация на большом экране и превращенные в звуковые сигналы стимулы помогают пациенту лучше ориентироваться в собственном лечении.

ПОКАЗАНИЯ:

Лечение дисфагии любой природы: постинсультная или посттравматическая, а также после респираторных расстройств или механических повреждений

Речевые нарушения (врожденные и приобретенные нарушения речи):

- функциональные и органические дисфонии (хрипота, гнусавость, осиплость и слабость голоса);
- дизартрия — нарушение произношения из-за недостаточной иннервации;
- афазия — расстройство речевой функции и нарушение понимания речи других при органических поражениях речевых центров коры головного мозга.



WINBACK-ТЕРАПИЯ



Тесар-терапия

WINBACK
BETTER FASTER GENTLER

WINBACK® Модель BACK 3S

Winback® был создан с целью объединить клиническое обследование, мануальную терапию и физиотерапию в одну процедуру. Сочетание уникального опыта каждого специалиста с прорывной технологией Winback® позволяет добиться быстрых и устойчивых результатов в реабилитации и спортивной медицине.

- Более 7 500 практикующих специалистов по всему миру.
- Более 400 спортивных команд и федераций используют оборудование Winback.
- Более 100 оснащенных государственных и частных клиник.

ВОЗМОЖНОСТИ ТЕКАР-ТЕРАПИИ

УСТРАНЯЕТ БОЛЬ

Мгновенно купирует боль на срок более 48 часов после терапии.

УСКОРЯЕТ ВОССТАНОВЛЕНИЕ

Запускает естественную систему самовосстановления организма за счет активации внутри- и внеклеточного обмена. Эффект от лечения сохраняется надолго после сеанса.

ОБЛЕГЧАЕТ ДВИЖЕНИЕ

Снимает напряжение за счет устранения локальных нарушений кровообращения. В результате диапазон движений восстанавливается быстрее.

СПОСОБСТВУЕТ ЛИМФОДРЕНАЖУ

Энергия WINBACK дополняет мануальные техники, используемые при лимфодренажном массаже. Терапия направлена на механическое воздействие, т.е. быстрое и эффективное выведение лишней жидкости.

Как работает WINBACK?

Энергия WINBACK представляет собой ток высокой частоты в диапазоне между 300 кГц и 1 МГц. Согласно научным исследованиям, волны в данном диапазоне ускоряют внутри- и внеклеточный ионный обмен и оказывают диатермический эффект на живые ткани. При повышении температуры метаболизм ускоряется, что позволяет тканям восстанавливаться быстрее. Энергия WINBACK является на 100% естественной для человеческого организма. Таким образом, текар-терапия ускоряет «естественную регенерацию» биологических тканей.

УСКОРЯЕТ
ПРОЦЕСС
РЕАБИЛИТАЦИИ

В2
РАЗА



МЕТОДЫ ТЕРАПИИ WINBACK: СОЧЕТАНИЕ МАНУАЛЬНЫХ ТЕХНИК И ФИЗИОТЕРАПИИ

Оборудование WINBACK® позволяет сочетать любые мануальные техники с текар-терапией для воздействия на структуры и ткани на разной глубине.



МОБИЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОДЫ

Используйте СЕТ-электрод для поверхностного воздействия на мягкие ткани или RET-электрод для транспорта энергии в глубокие твердые ткани.



АППЛИКАТОР FASCIA

Фасция – это соединительнотканная оболочка мышц, суставов, нервов и сосудов, состоянием которой часто пренебрегают. При возникновении фасциальных спаек развивается плохая подвижность в суставах, нарушение координации движений, перегрузка мышц и, как результат, появление болей. Специальный аппликатор FASCIA, соединенный с электродом, позволяет предупредить образование спаек, улучшить эластичность и восстановить амплитуду движения.



АППЛИКАТОРЫ МНОГОПОЛЯРНЫЕ MIX3

Мобильный электрод с 3 динамическими полюсами, которые попеременно переключаются между излучающим и принимающим энергию. MIX3 предназначен для клеточной стимуляции поверхностных слоев ткани. Необходимый эффект достигается в 6 раз быстрее, чем при традиционной текар-терапии.

RET БРАСЛЕТЫ ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ИННОВАЦИЯ WINBACK

Браслеты освобождают руки терапевта для полной свободы действий. Браслеты заменяют мобильные электроды – энергия передается пациенту через пальцы во время массажа. Данная методика позволяет легко внедрить WINBACK в свою рутинную работу.




WINBACK® Модель R-SHOCK

R-SHOCK (Hi-Tens), последняя инновация от Winback®, сочетает в себе преимущества нескольких технологий. Синергия высокочастотной текар-терапии и электростимуляции, комбинированных и излучаемых через один и тот же электрод, позволяет получить быстрый и устойчивый обезболивающий эффект.

R-SHOCK имеет несколько режимов воздействия: локализованный, поверхностный, глубокий и обезболивающий.

Преимущества R-SHOCK:

- Мощный и эффективный, R-SHOCK — легкое и компактное устройство (1,2 кг),
- Лечение можно проводить чаще, что позволяет терапевту оптимизировать время восстановления каждого пациента (от 2 до 3 сеансов в неделю в зависимости от патологии).
- R-SHOCK можно сочетать с мануальным или активным лечением во время одного сеанса.
- Благодаря практически нулевому времени запуска и интуитивно понятному меню, R-SHOCK экономит время пациента и терапевта.
- Благодаря встроенному Wi-Fi R-SHOCK может удаленно загружать обновления и проходить технические проверки, что значительно оптимизирует сервис оборудования.
- Универсальный аппарат: R-SHOCK используют при заболеваниях позвоночника, для терапии пациентов с остеопорозом, переломами, в послеоперационном периоде и др.

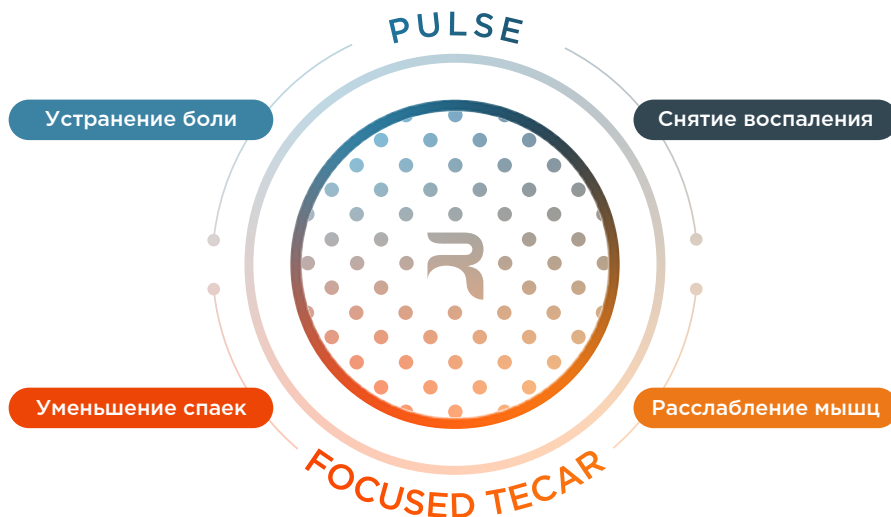

R-SHOCK + Fascia Tool

R-SHOCK можно комбинировать с инструментом для мобилизации мягких тканей Fascia Tool. Механическое воздействие в сочетании с диатермическими и биологическими свойствами энергии TECAR позволяет в рекордно короткие сроки избавиться от спазм и восстановить эластичность.

Магнитотерапия



ЕМТ-ТЕРАПИЯ / ВИМ-ТЕРАПИЯ
Низкочастотная магнитотерапия

Magnetolith®

Экстракорпоральная магнитнотрансдукционная терапия (ЭМТТ) с помощью MAGNETOLITH® открывает новые возможности в регенерации и реабилитации.

Новаторская методика ЭМТТ отличается от других форм магнитотерапии использованием волн высокой частоты — 100-300 кГц. Высокая мощность обеспечивает глубину проникновения энергии до 18 см и широкую область применения.

Преимущества ЭМТТ®:

- неинвазивная амбулаторная терапия в большинстве случаев не имеет побочных эффектов;
- применение при заболеваниях опорно-двигательного аппарата;
- терапия без термического воздействия;
- высокий комфорт пациента и простота в обращении;
- клинически доказанная эффективность терапии.

MAGNETOLITH® в повседневной практике

КОМФОРТНАЯ И ПРОСТАЯ ПРОЦЕДУРА ТЕРАПИИ:

- отсутствие для пациента необходимости снимать одежду;
- эффективная работа без утомления;
- позиционирование аппликатора вручную или с помощью гибкого держателя;
- регулируемая длительность сеанса от 5 до 20 минут в зависимости от показаний;
- регулировка частоты до 10 имп/с.



ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ЭМТТ®:



Дегенеративные заболевания суставов.

Такие проявления износа, как артроз (рук, колена, бедра, плеча, локтя), спондилоартроз, грыжа межпозвоночного диска.



Спортивные травмы. Хроническое воспаление сухожилий и суставов, синдромы перенапряжения сухожилий, остеоит лобковой кости.




Болеутоляющая терапия. Хроническая боль, боли в спине, люмбаго, напряжение, радикулопатии.

Super Inductive System (SIS)

Аппарат для высокочастотной магнитотерапии SIS (ВИМТ) представляет собой **уникальное сочетание технологий**: запатентованная магнитная катушка, магнитостимуляция на частоте до 150 Гц, мощная система охлаждения COOL FLOW TECHNOLOGY™, гибкий 6-секционный кронштейн. Все это работает в синергии для точного воздействия на глубокие ткани с целью решения различных терапевтических задач.

Показания:

- купирование болевого синдрома;
- восстановление подвижности суставов;
- заживление переломов;
- миостимуляция;
- лечение спастичности;
- восстановление дыхательной функции после covid-19.

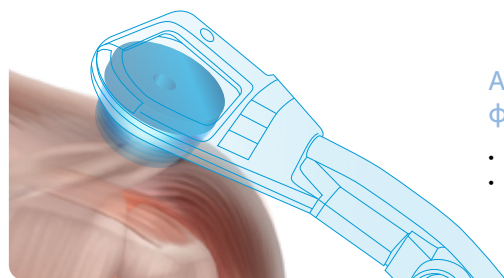

6-секционный кронштейн

для установки аппликатора в любом положении.



Удобный дисплей

Интуитивно понятное управление с цветным сенсорным экраном (8,4 дюйма).

Аппликатор фокусированного поля

- точное направление;
- глубокое воздействие.



Магнитотерапия

Emsella

EMSELLA — это революция в области интимного здоровья! Абсолютно неинвазивный и безболезненный метод профилактики и лечения заболеваний малого таза.

В основе работы системы лежит запатентованная технология HIFEM.

Высокоинтенсивная сфокусированная электромагнитная энергия проникает глубоко в ткани и вызывает 12 тысяч супрамаксимальных сокращений мышц тазового дна за 28 минут. В результате происходит стимуляция даже тех мышц, которые невозможно сознательно напрячь: гладкой мускулатуры влагалища, мочевого пузыря, простаты и сосудов малого таза. Такого эффекта невозможно добиться какими-либо упражнениями.



Благодаря Emsella решить проблему недержания мочи можно всего за 6 сеансов по 28 минут.

Магнитотерапия

Авантрон

Стимуляция мышц тазового дна на магнитном кресле Авантрон проходит без применения различных электродов и инвазивных датчиков. Пациент не нуждается в какой-либо подготовке перед терапией, может проходить процедуру не раздеваясь, комфортно сидя в кресле и проводя время за чтением, прослушиванием музыки или просмотром видео. Процедура экстракорпоральной магнитотерапии абсолютно безболезненна, не доставляет никакого дискомфорта пациенту.

Показания:

- восстановление после операций на органах малого таза;
- воспаление органов малого таза;
- хроническая тазовая боль;
- недержание мочи;
- хронический простатит;
- сексуальная дисфункция.

В среднем каждая процедура длится около 20 минут.



При помощи магнитного воздействия на мышцы и органы малого таза, в процессе терапии происходит безболезненное сокращение и расслабление мышц. В результате улучшается тонус мышц и органов малого таза, нормализуется кровоснабжение, уходят застойные явления в области таза.

Магнитотерапия

Магнитотурботрон®

Магнитотурботрон® — магнитотерапевтическая установка, создающая вращающееся магнитное поле (ВМП) с максимальной индукцией 3 мТл вокруг всего тела пациента одновременно.

Общие показания:

- болезни сердца;
- неврологические расстройства;
- грыжи, протрузии, остеохондроз позвоночника;
- нарушение кровообращения;
- ревматоидные заболевания, артрит, артроз различного генеза;
- заболевания эндокринной системы;
- заболевания опорно-двигательного аппарата;
- мочеполовые, инфекционные заболевания;
- растяжения, переломы, ушибы.

Дополнительные показания:

Онкологические заболевания следующих форм и стадий (при комплексном или комбинированном лечении):

- инкурабельные формы злокачественных новообразований для снятия болевого синдрома и коррекции иммунного статуса;
- лимфорея после обширных операций на молочной железе;

- неоперабельные послеоперационные рецидивы и метастазы злокачественных новообразований;
- мастопатия при отсутствии показаний к хирургическому лечению;
- местнораспространенный рак молочной железы в фазе предоперационного лечения;
- предотвращение и снижение побочных эффектов (эритем, отеков, эпителиитов) при лучевой и химиотерапии;
- злокачественные опухоли молочной железы и других органов в послеоперационном периоде.



Оборудование предназначено для крупных учреждений: медицинских лечебно-диагностических и оздоровительных центров, больниц, санаториев, профилакториев.

Магнитотерапия

Bio Life Therapy

Магнитотерапия подразумевает воздействие на ткани слабыми низкочастотными пульсирующими магнитными полями, что способствует упорядочиванию зон, находящихся в состоянии магнитного беспорядка. В результате нормализуется проницаемость клеточных мембран, оптимизируются биохимические реакции в клетках.

Магнитное поле воздействует на парасимпатическую нервную систему, налаживает гуморальную регуляцию и метаболические процессы.

Преимущества:

- 44 запрограммированных протокола;
- возможность создания индивидуальных программ и сохранения их в памяти прибора;
- портативный аппарат весом 4кг в кейсе для транспортировки;
- возможность одновременного воздействия на несколько зон;
- безболезненные процедуры;
- минимум противопоказаний (эпилепсия, наличие электронных устройств в теле, беременность).



Устройство используют
**в ортопедии, неврологии,
реабилитационной
и спортивной медицине.**



Обезболивающее, седативное, тепловое и успокаивающее действие магнитного поля аппарата **позволяет снизить выраженность боли, скованность суставов и отечность околосуставных тканей, а также укрепить связочный аппарат.**

BIO LIFE THERAPY СПОСОБСТВУЕТ:

- устранению избыточного количества межклеточной жидкости и ликвидации отеков;
- восстановлению проницаемости клеточных мембран;
- подавлению выработки медиаторов воспаления;
- ускорению передачи нервных импульсов;
- устранению мышечных спазмов;
- усилению выработки коллагена;
- оптимизации процесса реминерализации тканей;
- снижению болевого синдрома.



Эффективен в лечении и реабилитации пациентов с **COVID-19** ассоциированной пневмонией.



Neuro-MSX

Терапевтический

Транскраниальная магнитная стимуляция (ТМС) — метод неинвазивной внешней стимуляции коры головного мозга короткими магнитными импульсами. В отличие от других методов стимуляции, магнитное поле высокой интенсивности легко проникает сквозь волосяной покров, кости черепа и мозговые оболочки, оказывая воздействие на плохо доступные зоны:

- глубокие нервные центры;
- периферические нервы;
- головной и спинной мозг.

Преимущество магнитной стимуляции заключается в глубине ее воздействия, неинвазивности и безболезненности. Воздействие магнитным полем может оказываться как транскраниально (через кору головного мозга), так и периферически.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- **Психиатрия** / Лечение депрессивных состояний, последствий ПСТР и симптомов различных психических и аддитивных расстройств.
- **Неврология** / Лечение широкого спектра заболеваний ЦНС, в том числе при реабилитации после инсульта и лечения нейропатической боли.
- **Педиатрия** / Реабилитация детей с ДЦП, синдромом Туретта, синдромом дефицита внимания и гиперактивностью, а также при задержке развития и речевых нарушениях.
- **Гинекология** / Восстановление мышц тазового дна при пролапсе тазовых органов и для лечения воспалительных нарушений различного генеза.
- **Реабилитация после COVID-19** / Лечение дыхательной недостаточности, которая развилась вследствие перенесенной коронавирусной инфекции.



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ:

- ПО содержит готовые протоколы лечения.
- Позволяет создать и сохранить индивидуальные программы терапии для каждого пациента.



КОЛЬЦЕВОЙ ИНДУКТОР

Кортикальная и периферическая стимуляция (шейные, люмбосакральные корешки, срамной нерв).

Идеален для стимуляции глубоко расположенных нервов.



УГЛОВОЙ ИНДУКТОР-ВОСЬМЕРКА

Сфокусированная глубокая кортикальная стимуляция.

Анатомическая форма, конгруэнтная форме головы, обеспечивает более плотное прилегание.



ИНДУКТОР КОНИЧЕСКИЙ

Самая глубокая стимуляция.

Подходит для стимуляции корковых представителей мышц нижних конечностей и тазового дна, мозжечка и DMPFC.

Ударно-волновая терапия



Радialная УВТ
Сфокусированная УВТ


Masterpuls® MP100/200 Ultra (Радиальная УВТ)

Компактные размеры, высокая надежность, незначительные сервисные расходы и малошумный интегрированный привод Air Power отличают приборы радиальной ударно-волновой терапии линейки Masterpuls® Ultra. Модель MP100 позволяет сочетать УВТ с вибрационной терапией. Аппарат MP200 совмещает эти две методики, а также дополнен вакуумной терапией.

Уникальная рукоятка FALKON имеет оптимальные эргономические характеристики и снабжена всеми необходимыми для управления кнопками. Благодаря ей у оператора нет необходимости подходить к основному блоку для коррекции параметров работы устройства. Все настройки можно выбрать непосредственно возле пациента. Особая форма рукоятки обеспечивает удобство, оптимальный уровень давления и прицельное воздействие волновых импульсов.

Показания:

- дегенеративно-воспалительное поражение тканей локтевого и коленного сустава;
- дорсалгия;
- хроническая энтезопатия;
- триггерные точки;
- ахиллодиния;
- подошвенный фасциит;
- хронические раны и язвы на коже;
- дорсальная пяточная шпора;
- диабетическая стопа.

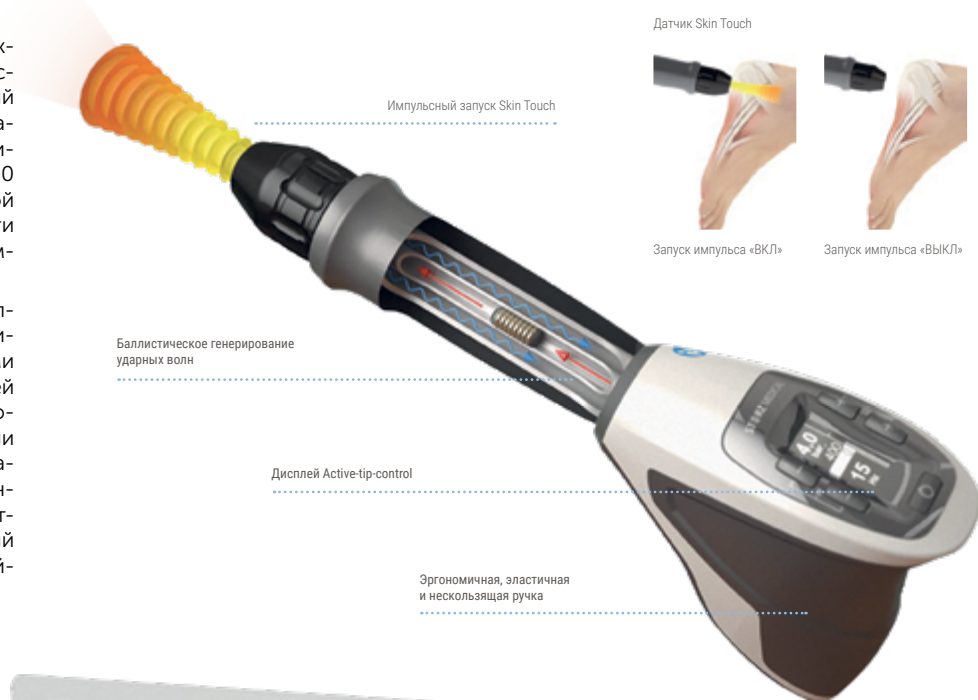

Датчик Skin Touch



Запуск импульса «ВКЛ»



Запуск импульса «ВЫКЛ»

Баллистическое генерирование ударных волн

Дисплей Active-tip-control

Эргономичная, эластичная и нескользящая ручка



Лечение стандартных показаний с помощью аппликатора C15



Лечение фасций с помощью аппликатора PERI-ACTOR® Sphere



Паравертебральное лечение с помощью аппликатора SPINE-ACTOR®



Ударно-волновая терапия

Shockmaster 500 (Радиальная УВТ)

ShockMaster 500 — единственный аппарат ударно-волновой терапии с функцией плавного автоматического нарастания силы удара в начале процедуры до максимально заданного уровня. Благодаря плавному началу процедуры снижается болезненность ощущений, и пациенты лучше переносят терапию. Это позволяет безболезненно устанавливать более высокие значения энергии уже с первого сеанса для быстрого эффекта и сокращения сроков терапии.

С 2020 года аппарат оснащен уникальной функцией автоматической подстройки параметров в зависимости от ощущений пациента. Это повышает комфорт процедуры и экономит время врача.



Готовые протоколы лечения

На основе ведущих научных исследований в области ударно-волновой терапии были составлены списки показаний и 90 протоколов лечения.

ПОДБЕРИТЕ ЛЕЧЕНИЕ ДЛЯ КАЖДОГО ПАЦИЕНТА:

1. Оценка состояния пациента

Guided Therapy System (умная система управления терапией) автоматически настраивает параметры лечения исходя из состояния вашего пациента.

2. Лечение пораженной зоны

Подберите подходящий аппликатор в зависимости от типа и глубины патологии. Начните терапию на основании результатов первичной оценки пациента.

3. Лечение триггерных точек

Если необходимо, смените аппликатор для лечения триггерных точек.

4. Расслабление мышечных зажимов

Аппликатор D-Actor помогает снять мышечное напряжение, улучшить циркуляцию крови и расслабить триггерные точки.

5. Стимуляция метаболической активности

Аппликатор V-Actor стимулирует метаболическую активность, выводит токсины, улучшает микроциркуляцию и расслабляет мускулы.



Ударно-волновая терапия

BTL-6000 FSWT (Сфокусированный)


Ударно-волновая терапия это неинвазивная альтернатива хирургическому вмешательству, которая позволяет воздействовать как на причину возникновения, так и на симптоматику хронической боли. Аппарат фокусированной ударно-волновой терапии BTL вызывает быстрое облегчение боли и восстановление подвижности посредством механической стимуляции.

ПОКАЗАНИЯ:

- боль в плече;
- хроническая боль в суставах;
- локтевой эпикондилит;
- «колено прыгуна»;
- ахиллодиния;
- пяточная шпора;
- несрастающиеся переломы;
- проблемы мышц тазового дна.

ОСОБЕННОСТИ:

- новая запатентованная технология электроакустического воздействия;
- регулируемая глубина фокальной зоны в зависимости от насадки: 0–35 мм, 15–50 мм, 30–65 мм;
- локальное воздействие на глубокие и поверхностные ткани;
- аппликатор с сенсорным экраном для постоянного мониторинга интенсивности ударной волны и настройки параметров;
- 27 предустановленных протоколов терапии;
- терапевтическая энциклопедия с анатомическими изображениями.

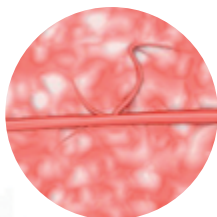


ДО ПРОЦЕДУРЫ

Слабость сосудистых стенок и застойные явления в малом тазу



В ПРОЦЕССЕ

Стимуляция размножения здоровых клеток, образование новых сосудов, усиление кровотока

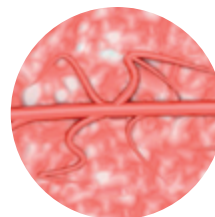

ПОСЛЕ ПРОЦЕДУРЫ

Улучшение эрекции, купирование болевого синдрома тазовой боли, облегчение симптомов простатита

Фокусированная ударная волна

позволяет гарантированно регулировать глубину проникновения в ткани при постоянной эффективной интенсивности. Терапия подходит для лечения как поверхностных, так и глубоких тканей на ограниченной площади.




Duolith® SD1 T-Top (Сфокусированный)

Новое поколение аппаратов фокусированной ударно-волновой терапии STORZ MEDICAL отличается современным дизайном, эргономичностью аппликаторов и широким спектром показаний. Фокусированные волны обеспечивают точечное воздействие на глубину до 125 мм.

Аппликатор фокусированных ударных волн Серия оснащён уникальной цилиндрической катушкой STORZ MEDICAL и обеспечивает оптимальную зону фокуса, а также равномерную высокую энергию воздействия. Все важнейшие элементы управления интегрированы в аппликатор. Частота и энергетический уровень настраиваются непосредственно на рукоятке.

Чрезвычайно гибкий кабель аппликатора и эргономичная рукоятка позволяют проводить процедуры без переутомления для эффективной ежедневной работы.

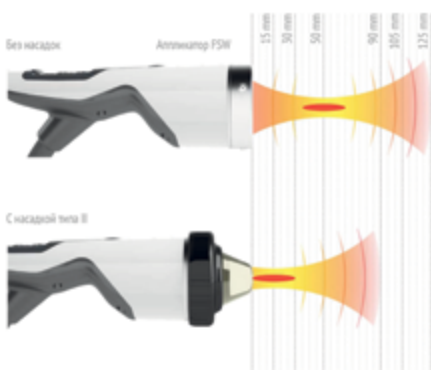

Расширенные возможности

Дополнительный сенсорный экран расширяет возможности аппарата: выбор параметров терапии, терапевтические рекомендации в формате фото и видео, детальный анатомический атлас с 3D моделями, база данных пациентов.



ОСОБЕННОСТИ:

- Работа без переутомления.
- Все элементы управления интегрированы в аппликатор.
- Снижение расходов на сервис благодаря простой смене катушки.
- Глубина зоны фокуса: 0-65 мм.
- Эффективность терапии: глубина проникновения до 125 мм.
- Возможность расширения до модульной системы диагностики и терапии Duolith SD1 Tower Ultra.
- Эксклюзивный доступ в режиме Он-лайн к информационному portalу ICE Shock Wave для получения дополнительной информации об аппаратах и методах терапии.

ПОКАЗАНИЯ:

Ахиллодиния/Плантарный фасциит/
Эпикондилит/Тендинит надколенника/
Тиббиальный стресс-синдром/
Кальцифицирующий тендинит/
Триггерные точки: периартикулярные
боли в плече.



Готовые протоколы терапии

Программное обеспечение Visible Body содержит готовые программы УВТ по патологиям, дополненные видеоинструкциями и иллюстрациями с рекомендованными точками воздействия.

Pulstar PSX

La Pressodynamie® — уникальный метод лимфодренажа, состоящий из комбинации двух запатентованных технологий Starvac Group.

- **THE SYSTEME DG2P** постоянно контролирует подачу воздуха и регулирует уровень давления в каждой воздушной камере. Инновационные технологии гарантируют адаптацию аксессуара под морфологию клиента во время процедуры.
- **THE ACTIVE WAVE** циклично создает повторную волну давления, имитируя мышечное сокращение, тем самым дополнительно стимулирует циркуляцию лимфатической и кровеносной системы.

Модель PSX — это уникальный метод сегментарной прессотерапии, которая гарантирует желанный результат в кратчайшие сроки и без риска.

Особенности:

- Связанные друг с другом воздушные камеры для регулирования давления;
- Централизованная система подачи воздуха;
- Удобные аксессуары;
- Возможность включить процедуры в комплексную программу оздоровления.



АКСЕССУАРЫ:

- **9-камерные манжеты для ног;**
- **10-камерные манжеты для ног;**
- **8-камерные манжеты для рук;**
- **9-камерные манжеты для живота**
Уникальный аксессуар (способствующий улучшению функции ЖКТ).

Прессотерапия

BTL-6000 Lymphastim Topline

Профессиональный 12-канальный аппарат пневматической прессотерапии BTL Lymphastim. Специальные манжеты для верхних и нижних конечностей оснащены множеством наслаивающихся друг на друга камер. Параметры давления регулируются в диапазоне 20–160 мм рт. ст. для каждого сектора, что обеспечивает мягкий массаж выбранной зоны для стимуляции естественной циркуляции лимфы по телу.

Особенности аппарата:

- 33 предустановленных протокола терапии и последовательности программ;
- встроенная терапевтическая энциклопедия с рекомендациями;
- функция памяти на 500 пользовательских программ;
- индикация активной камеры на дисплее;
- расширенные настройки градиента давления;
- возможность отключения одной или нескольких камер;



Индивидуально
регулируемое давление для
каждого сектора.

Аппликатор-брюки 24 на
молнии

Аппликатор для нижних
конечностей

Аппликаторы для верхних
конечностей

Аппликатор-брюки 24



Прессотерапия

Hivamat®

Аппарат Hivamat® 200 представляет запатентованный метод терапии — глубокая осцилляция. Его действие основано на способности электростатического поля вызывать глубоко проникающие в ткани вибрации и колебания.

Импульсы проходят через ручной аппликатор и мягко воздействуют на кожу, соединительную ткань, подкожную жировую клетчатку, лимфатические и венозные сосуды. В результате уменьшаются болевые ощущения, ускоряется снятие воспаления и отека, происходит восстановление поврежденных тканей.

Аппарат упрощает выбор параметров глубокой осцилляции за счет встроенного списка показаний с практической информацией, графикой, анимацией. Специалист имеет доступ к базе данных пациентов и сохраненным программам терапии.



Глубокая осцилляция

Curapuls 970

Аппарат Curapuls 970 позволяет использовать высокочастотную энергию для выборочного локального воздействия на ткани и суставы. Данный эффект реализуется с помощью емкостных (дисковых и плоских) излучателей и индукторных электродов. Автоматическая подстройка генератора обеспечивает максимальную эффективность процедуры вне зависимости от положения пациента и его движений во время процедуры.

Преимущества:

- работа в непрерывном и импульсном режимах;
- индукционные и емкостные излучатели разного диаметра для воздействия на поверхностные и глуболежащие ткани;
- термическое и атермическое воздействие на ткани;



- излучатели-трансформеры flexiplode анатомической формы для процедур в зоне поясницы и плеча;
- подвижный кронштейн для установки аппликатора в любом положении;
- встроенный таймер 0-30 минут.



УВЧ терапия и индуктотермия

InfraRed Radiator

InfraRed Radiator — мощный современный аппарат для инфракрасной терапии с изменяемым полем облучения. Инфракрасная лампа Инфраред Радиатор поставляется на мобильном штативе, регулируемом по высоте и углу наклона излучателя.

ПОКАЗАНИЯ:

- ослабление боли;
- подготовка к массажу;
- релаксация;
- терапия лица и косметическое лечение;
- обморожения.



Особенности Infrared Radiator:

- Держатели позволяют настраивать высоту и наклон излучателя.
- Каждый излучатель может быть включен/выключен отдельно для индивидуальной настройки.
- Встроенный таймер.



Инфракрасная терапия

Radarmed 950+

Микроволновая терапия — лечебный метод, при котором на организм больного воздействуют электромагнитным полем сверхвысокой частоты. СМВ-терапия способствует расширению кровеносных сосудов, улучшению кровотока, уменьшению спазма гладкой мускулатуры и болевого синдрома.

Аппарат СМВ-терапии Radarmed 950+ работает на частоте 2,4 ГГц и имеет длину волны 12 см. Такие характеристики дают возможность проведения малодозовой терапии глубоких тканей.

Преимущества:

- непрерывный и импульсный режимы;
- легкий переход между непрерывной и импульсной терапией;
- плавная регулировка выходной мощности 0-250 Вт;
- параметры отображаются на подсвечиваемом дисплее;
- функция памяти для хранения протоколов лечения;
- 3 вида излучателей: локальный, продольный, чашеобразный;
- система диагностики состояния излучателей и аппарата;
- встроенный справочник с рекомендациями по патологиям.



Дополнительная комплектация:

- локальный излучатель /продольный излучатель /чашеобразный излучатель;
- защитные очки;
- методическое пособие.



Микроволновая терапия (СМВ терапия)

BTL-6000 High Intensity Laser

Компания BTL разработала новый лазер высокой интенсивности с роботизированной системой сканирования, которая позволяет воздействовать как на маленькие, так и на более обширные области площадью до 1200 см².

Роботизированная система сканирования:

- Первая роботизированная система сканирования, которая может воздействовать на области площадью до 1200 см².
- Идеально подходит для лечения боли в пояснице, в больших мышечных группах и суставах.
- Мониторинг температуры тела для равномерного распределения энергии и максимального эффекта лечения.
- Оснащена сканером термического восприятия для определения индивидуальных настроек терапии.
- Постоянный контроль безопасного расстояния между пациентом и роботизированной системой сканирования.



Лазерная терапия

Cryoflow 1000 IR

Аппарат криотерапии оснащён уникальной функцией биологической обратной связи (БОС) с дистанционным контролем температуры поверхности кожи. ИФ датчик измеряет температуру кожи на протяжении всей процедуры и автоматически подстраивает температуру потока воздуха, чтобы заданные параметры поддерживались до конца сеанса. Таким образом, исключаются слишком низкие температуры и риск обморожения. Также исключены слишком высокие температуры и риск нулевого эффекта от терапии.

С 2020 года аппарат оснащён уникальной функцией автоматической подстройки параметров в зависимости от ощущений пациента. Это повышает комфорт процедуры и экономит время врача.

ОСОБЕННОСТИ АППАРАТА:

3 режима терапии:

- **Автоматический режим** Cryoflow 1000 IR имеет 52 встроенных протокола лечения. Специалист может выбрать программу лечения по назначению или цели терапии. Таким образом остается только зафиксировать аппликатор в держателе и направить на пораженную зону.
- **Полуавтоматический режим.** Благодаря режиму БОС специалист может самостоятельно ввести параметры терапии и аппарат будет автоматически поддерживать установленную температуру.
- **Ручной режим.** В данном режиме врач самостоятельно меняет скорость и мощность потока воздуха и следит за температурой поверхности кожи на экране.

Протокол «ударно-волновая терапия»

Криотерапия хорошо сочетается с ударно-воздушной терапией, поэтому Cryoflow 1000 IR может применяться до или во время УВТ. Охлаждение имеет болепонижающий эффект и повышает комфорт пациентов во время процедуры. Для совместного применения с аппаратами ударно-волновой терапии в аппарат встроена автоматическая программа



ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Штатив для держателя насадок позволяет освободить руки специалиста во время работы.
- Аппарат не требует обслуживания и расходных материалов. Контур охлаждения рассчитан на весь срок службы аппарата.
- 3 съемные насадки (5/15/25 мм) для терапии различных зон.
- 52 встроенные программы: по 29 назначениям и 6 целям терапии.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ:

- хирургия;
- ортопедия;
- травматология;
- спортивная медицина;
- ревматология;
- неврология;
- восстановительная медицина;
- дерматология;
- косметология.

Преимущества локальной криотерапии:

- возможность терапии при поврежденном кожном покрове;
- снимает воспаление и отеки;
- обезболивающее действие;
- сокращает сроки лекарственной терапии;
- эффект от воздействия сохраняется около 3 часов;
- снимает мышечные спазмы
- улучшает микроциркуляцию, артериальный кровоток, лимфоток, венозный отток.

Мощный поток воздуха

Понижает температуру поверхности кожи до 12°C за 1 минуту для оптимальной стимуляции метаболизма. Благодаря мощности аппарата и точности температур, сокращается длительность процедур.



Локальная криотерапия

OXYTERRA (ГИПО-ОКСИ-1)

Аппарат для интервального гипоксии-гипероксического тренинга Oxyterra Oxyterra является самым мощным аппаратом на рынке — система производит до 40 л газовой смеси в минуту. Во время тренировок пациент дышит через маску газовой смесью с выбранной концентрацией кислорода в зависимости от цели терапии. Аппарат проводит гипотест перед началом терапии, а также контролирует концентрацию кислорода в крови и ЧСС пациента для безопасности процедур.



Гипо-гипероксическая тренировка

Методика гипо-гипероксической тренировки основана на чередовании фаз гипоксии (снижения уровня кислорода во вдыхаемом воздухе) и гипероксии (повышения уровня кислорода). Процедуры повышают общую выносливость организма, уменьшают воспалительные процессы, способствуют регенерации митохондрий и ускоряют восстановление после заболеваний различного генеза.

Ингаляционная терапия | гипокситерапия

BreezeLite

Аппарат предназначен для проведения ингаляций гелий-кислородными газовыми смесями с возможностью их подогрева при выведении из гипоксических состояний и заболеваний, сопровождающихся гипоксией.

Эффекты:

- снижение сопротивления дыхательных путей;
- увеличение дыхательного объема и равномерности вентиляции легких;
- улучшение перфузии бронхо-легочной ткани;
- нормализация кислотно-щелочного равновесия;
- улучшение доставки O_2 и выделения CO_2 ;
- усиление кровообращения по малому кругу за счет термического эффекта;
- улучшение сосудистой микроциркуляции и тонуса сосудов;
- повышение ферментативной активности организма;
- стимуляция обмена веществ и метаболизма.

Кислородно-гелиевая терапия при коронавирусе

Метод гелиокс-терапии включен во временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению COVID-19.



Ингаляционная терапия | гелий-кислород

NobiliXe (ксенон)

Аппарат предназначен для проведения лечебных ингаляций ксенон-кислородными газовыми смесями с терапевтическими или профилактическими целями.

Эффекты:

- комплексная терапия сердечно-сосудистых и неврологических заболеваний;
- восстановление после химиотерапии;
- стресс-протективное воздействие;
- снижение ПТСР;
- нивелирование депрессивных состояний;
- лечение нарушений сна;
- избавление от зависимостей (наркотической, алкогольной);
- восстановление общего состояния организма после болезней;
- комплексное лечение синдрома хронической усталости;
- повышение работоспособности;
- обезболивание и снятие отеков во время косметологических процедур.



Универсальное применение

Медицинский ксенон является природным анальгетиком и анестетиком. Применение газовых смесей с ксеноном способствует быстрому введению больного в состояние наркоза, быстрому пробуждению, а также обезболиванию без побочных действий. В терапии аппарат используется для проведения ингаляций медицинскими газами в рамках реабилитационных или профилактических мероприятий.



Ингаляционная терапия | ксенон-кислород

Система очистки дыхательных путей (СОДП)

Система очистки дыхательных путей предназначена для проведения терапии по очистке дыхательных путей от легочных выделений при помощи принудительных высокочастотных малоамплитудных колебаний стенок грудной клетки.

Принцип работы:

- Компрессор надует жилет, быстро меняя в нем давление воздуха.
- На грудную клетку пациента оказывается ритмичное сдавливающее воздействие, имитирующее естественный кашель.
- Густой слизистый секрет (мокрота) разжижается, отделяется от бронхиальных стенок и перемещается к центральным, более крупным отделам дыхательных путей, откуда впоследствии легко удаляется при помощи обычного кашля или аспирации.

ПОКАЗАНИЯ:

- эмфизема, бронхиальная астма и муковисцидоз;
- пульмонологическая реабилитация и реаниматология;
- пневмония и хронический обструктивный бронхит;
- зависимость от аппарата искусственной вентиляции легких;
- легочная недостаточность травматического характера;
- острый респираторный дистресс-синдром.



Компрессионное воздействие положительным давлением в области грудной клетки увеличивает дыхательный объем и скорость воздушного потока по дыхательным путям. Ускоренное наполнение и опорожнение предотвращает закрытие мелких дыхательных путей на выдохе и приводит к более равномерной вентиляции легких.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Доказанная эффективность** в удалении скапливающегося секрета при острых и хронических заболеваниях легких.
- **Возможность пациента самостоятельно останавливать терапию с помощью ручной груши управления** при возникновении дискомфорта.
- **Установленные и индивидуальные программы терапии.**
- Возможность задания собственной программы терапии (до 8 точек программирования) с указанием для каждой точки собственных значений частоты, давления и времени терапии в пределах установленных лимитов.
- **Режим плавного старта с постепенным нарастанием частоты и давления в течении 20 секунд.**
- **Комфортные жилеты разных размеров**, пригодные для многократной санитарной обработки.
- **Простота сборки и использования аппарата**, а также удобство транспортировки.
- **Широкий диапазон настройки частоты колебаний воздушного потока**, возможность изменения значений давления подаваемой воздушной струи и времени терапии, а также наличие экстренной кнопки для остановки терапии. Благодаря возможности задания индивидуальных параметров, а также режиму плавного старта система может использоваться одинаково эффективно у взрослых и детей.



«О ПОРЯДКЕ ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ ВЗРОСЛЫХ»

от 31 июля 2020 г.

КАБИНЕТ ФИЗИОТЕРАПИИ

№	Наименование оборудования	Наименование вида	Предлагаемое оборудование	Стр.
1	Аппарат для электромиостимуляции многоканальный	Система физиотерапевтическая чрескожной электрической нейростимуляции	VitalStim® Plus	8
2	Ингалятор переносной	Система ингаляционной терапии, с подогревом	BreezeLite	28
3	Система ультразвуковая для физиотерапии	Система ультразвуковая для физиотерапии	Intellect® Mobile Ultrasound	7
4	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	Стимулятор глубоких тканей электромагнитный переносной	Bio Life Therapy	17
5	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	Система глубокой электромагнитной стимуляции тканей, профессиональная	Magnetolith®	14
			Super Inductive System (SIS)	15
			Emsella	15
			Авантрон	16
			Магнитотурботрон®	16
6	Лазер для физиотерапии/ опорно-двигательной системы, профессиональный	Лазер для физиотерапии/опорно-двигательной системы, профессиональный	Intellect® Mobile Laser	7
			BTL-6000 High Intensity Laser	26
7	Аппарат низкочастотной электротерапии микротоками переносной	Система физиотерапевтическая для электростимуляции, с питанием от сети	Intellect® Mobile Stim	7
			Hivamat®	25
8	Система мультимодальной физиотерапии	Система мультимодальной физиотерапии	Intellect Mobile Combo 2778	см. на сайте
			Intellect® Advanced	4
9	Аппарат для УВЧ-терапии	Система микроволновой диатермической терапии	Radarmed 950+	26
			Curapuls 970	25
10	Стимулятор электромагнитный транскраниальный	Система магнитной нейростимуляции, передвижная	Neuro-MSX	18
11	Система для криотерапии	Система для криотерапии	Cryoflow 1000 IR	27
12	Аппарат для вакуум-терапии переносной	Система косметологическая мультимодальная для лечения дефектов и омоложения кожи	Pulstar PSX	24
			BTL-6000 Lymphastim	24
			Topline	24
13	Аппарат для фотодинамической терапии	Аппарат для фотодинамической терапии	InfraRed Radiator	25
14	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	Нагреватель пакетов для тепловой терапии	Аппарат для разогрева теплоносителей 3.60-WTB2	см. на сайте

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

ОСНАЩЕНИЕ МЕДИЦИНСКИХ УЧРЕЖДЕНИЙ ВОССТАНОВИТЕЛЬНОГО ПРОФИЛЯ


- восстановительные и реабилитационные центры
- санаторно-курортные и медицинские учреждения
- спортивные объекты
- спа- и велнес-центры



ОРТО-
РЕАБИЛИТАЦИЯ




НЕЙРО-
РЕАБИЛИТАЦИЯ

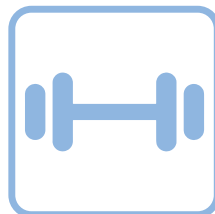

ЛФК



КИНЕЗИТЕРАПИЯ

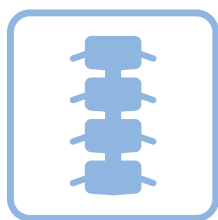

ТРАКЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ



ФИЗИОТЕРАПИЯ



БАЛЬНЕОЛОГИЯ



ИППОТЕРАПИЯ

ПОДРОБНЕЙ НА НАШИХ САЙТАХ!

WWW.REXAMED.RU

WWW.SPA.REXAMED.RU

WWW.CHATTANOOGA.SU

аппарат физиотерапии ■ прибор для физиотерапии ■ прибор для физиопроцедур
физиоаппаратура ■ УВТ ■ лазер для физиотерапии ■ домашние физиоаппараты
текар Тесар-терапия ■ WINBACK ■ УВЧК ■ электротерапия ■ ФЭС ■ лазерная терапия
аппарат для ингаляций ■ ксенонотерапия ■ водородотерапия ■ криосауна
криотерапия ■ гипокситерапия ■ гипоксигипероксический тренинг ■ гелиокстерапия
ударно-волновая терапия ■ CHATTANOOGA ■ OXYTERRA ■ высокотонная терапия
электростимуляция мышц ■ ультразвуковая терапия ■ нейромышечная стимуляция
электромиостимуляция ■ прессотерапия ■ лимфодренаж ■ лектромагнитное кресло
магнитотерапия ■ EMSELLA ■ транскраниальная магнитная стимуляция ■ ТМС ■ ЭКГ ■ SIS
ВИМТ ■ высокоинтенсивная магнитотерапия ■ магнитотурботрон



ООО «Хелси Ворлд»

+7 812 385 74 01

e-mail: info@rexamed.ru

www.rexamed.ru