

Cryo-Thermal

Аппарат для локальной криотерапии и термотерапии



Локальная
криотерапия

Термотерапия

Контрастная
терапия

Термальный шок

Синергия qmd:

криотермальная лазерная
терапия для быстрого снятия
боли, воспаления и регенерации.



Крио-термо Терапия

Лечение с помощью
аппликатора на элементах
Пельтье в диапазоне
-15...+45°C. Мощный контур
охлаждения и нагрева
со скоростью 30°C
за 30 секунд.



Уникальный Лазер

Лазер 808, 1064, 1120нм.
Высокая интенсивность
и система комбинации
длин волн в рамках одного
луча для выраженного
лечебного действия
с первой процедуры.



Смарт- Протоколы

Интерактивный
интерфейс qmd
и интеллектуальные
протоколы. Смарт-терапия
по анатомическим зонам
и через выбор необходимого
лечебного эффекта.

qmd: инновационный дизайн,
интуитивное управление,
европейское качество

i-NOVO
AWARDS
WINNER
2017

Комбинированная терапия:



Локальная
криотерапия + лазер



Контрастная
терапия + лазер



Почему qmd?

qmd объединяет лучшее –
выгоду владения, доказанную
клиническую эффективность
и универсальность применения.

Показания:

Растяжения, вывихи,
ушибы, отёки, переломы,
контрактуры, болевой
синдром, нарушение
микроциркуляции,
остеоартрозы.
Острые хронические
воспаления.

Применение:

Ортопедия, травматология,
спортивная медицина,
ревматология, неврология,
реабилитация,
послеоперационный
период, дерматология
и косметология.



Лазер qmd – работа за троих!

Одновременное действие трёх длин волн гарантирует
результат с первого сеанса.

**1064 +
808 нм**

Глубокая
стимуляция
тканей.

**1064 +
1120 нм**

Быстрая
терапия
болей,
спазмов и
воспалений.

**1064 + 808
+ 1120 нм**

Наилучшее
противо-
отёчное
действие.



Технические характеристики:

Длины волн лазеров	808; 1064; 1120 нм
Класс лазеров	4
Диапазон температур криотермального модуля	-15...+45°C
Сенсорный дисплей	10,4"
Питание / Мощность	220 В, 50 Гц / 150 Вт
Габариты с тележкой	558(д) x 560(г) x 1150(в) мм
Вес / Вес с тележкой	6,4 кг / 37,7 кг

Модели qmd:

Лазер	Лазер + крио-термальный модуль	Длина волны [нм]	Мощность [Вт]
eos	eos cryo-thermal	1064	8
eos plus	eos plus cryo-thermal	1064	15
ares	ares cryo-thermal	1064+808	18
helios	helios cryo-thermal	1064 +808 +1120	24
Криотермальный модуль (автономный)			
cryo-thermal			



Лазерные насадки qmd:

3 лазерных насадки задают фиксированные расстояния между лазером и телом. Насадка определяет размер лазерного пятна и плотность мощности светового потока.




Режимы излучения лазера qmd:




Непрерывный:

Биостимуляция клеточной регенерации и миорелаксация.

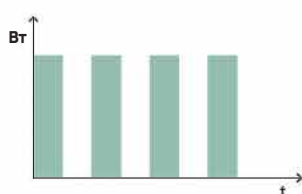


Импульсный:

Противоотечная терапия и избирательная стимуляция целевых медиаторов.

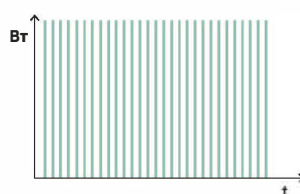

Суперимпульсный:

Мощное обезболивание с глубоким воздействием на триггерные зоны.

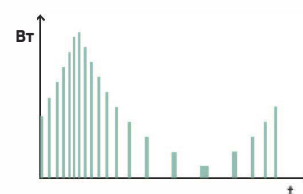

Гармонический:

Одновременная мультитеерапия нескольких патологий.

Узнайте о новых
возможностях
Вашей клиники
вместе с qmd на
qmd.asvomed.ru



ООО «Хелси Ворлд»
Россия, г. Санкт-Петербург
+7 812 385-74-01

e-mail: info@rexamed.ru
www.rexamed.ru