



ADVANCED RECOVERY FOR ATHLETES

BY CR7

СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ

ЧТОБЫ ВЫХОДИТЬ
ЗА ПРЕДЕЛЫ



ДЛЯ СПОРТА

ТЕХНОЛОГИИ БРЕНДА AVA РАЗРАБОТАНЫ ПРИ УЧАСТИИ КРИШТИАНУ РОНАЛДУ И ЕГО КОМАНДЫ ФИЗИОТЕРАПЕВТОВ.

АППАРАТЫ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ В СПОРТЕ ВЫСОКИХ ДОСТИЖЕНИЙ ПО ВСЕМУ МИРУ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ И УСКОРЕНИЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ К АКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

RM REXAMED

Купить технологии бренда AVA у официального дистрибьютора в России **REXAMED** – значит получить надежное профессиональное оборудование, созданное для ежедневных нагрузок и длительной автономной работы.



“ Объединяя науку, инновации и дизайн, мы создаём оборудование, которое меняет подход спортсменов к заботе о своём теле.

Наша миссия — предоставлять решения, которые не только повышают эффективность восстановления, но и выводят опыт и результаты спортсменов на новый уровень.



ledboote

CRYO

CRYO SPORT

ADVANCED RECOVER

СИСТЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ НОГ



AVABOOTS
AVABOOTS

CRYO SPORT BY CR7

КРИОТЕРАПИЯ + ПНЕВМОКОМПРЕССИЯ НОГ

CRYO SPORT BY CR7 – ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ КРИОКОМПРЕССИИ, СОЧЕТАЮЩИЙ ЛОКАЛЬНУЮ ГИПОТЕРМИЮ И УПРАВЛЯЕМУЮ ПНЕВМОКОМПРЕССИЮ, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ ЭФФЕКТИВНО УМЕНЬШАТЬ ОТЕК КОНЕЧНОСТЕЙ, УСТАЛОСТЬ И ДИСКОМФОРТ В МЫШЦАХ.

ЧТО ТАКОЕ КРИОКОМПРЕССИЯ

Криокомпрессия – сочетание локального холодового воздействия и активной пневмокомпрессии. При резком охлаждении тканей происходит сужение сосудов, снижение дискомфорта и уменьшение отечности. А компрессия способствует выведению застойных явлений и наполняет мышцы энергией.

CRYO SPORT охлаждает мышцы и суставы с помощью ледяной воды (1-2°C), которая циркулирует по манжетам анатомической формы, одновременно создавая компрессию до 75 мм рт. ст. Аппарат функционирует от аккумулятора (3 часа автономности) и позволяет проводить сеансы вне клиники.



ПОЛЬЗА КРИОКОМПРЕССИИ В СПОРТЕ

Сочетание холода и компрессионного массажа помогает снять мышечную усталость (крепатуру), убрать отечность и ускорить возвращение в строй после тяжелых тренировок. Кроме того, криокомпрессия для спортсменов применяется в RICE-протоколе на этапе до 72 часов после повреждения.




ПОКАЗАНИЯ

- ✓ Дискомфорт в мышцах
- ✓ Отечность после ушиба или растяжения
- ✓ Гематомы
- ✓ Перенапряжение связок и сухожилий



ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕД РАЗДЕЛЬНЫМ ПРИМЕНЕНИЕМ ХОЛОДА И КОМПРЕССИИ

- ✓ **Повышение результативности:** быстрое восстановление спортсменов позволяет проводить более интенсивные и длительные тренировки.
- ✓ **Профилактика:** снижается риск повреждений мышц и суставов.
- ✓ **Улучшение подвижности суставов:** движения становятся более свободными и плавными.

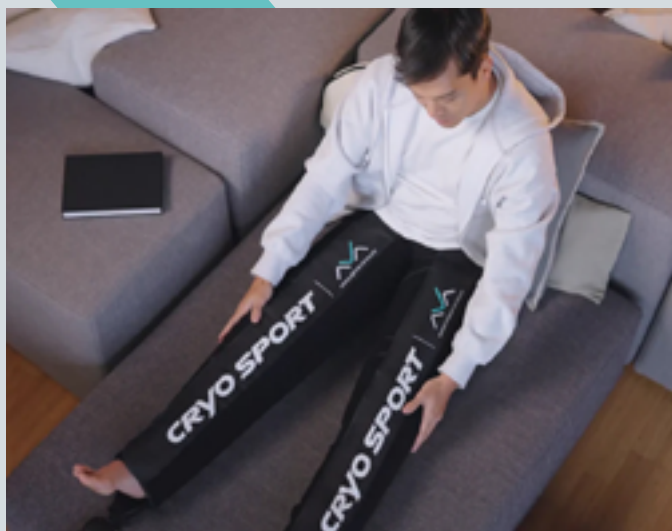

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И КОМПЛЕКТАЦИЯ

Вес: 14 кг

Аккумулятор: 3 часа автономной работы, зарядка 4 часа

Резервуар: 3,5 л с двойной теплоизоляцией

Диапазон компрессии: 0 / 25 / 50 / 75 мм рт. ст., непрерывный или прерывистый цикл

Подача воды: 3 режима (низкий, средний, высокий)

Шланги: одинарный и двойной соединители



ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ REXAMED

AVABOOTS 5.0 BY CR7

ПНЕВМОКОМПРЕССИЯ НОГ

AVABOOTS 5.0 BY CR7 – ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ КОМПРЕССИОННОЙ ТЕРАПИИ ДЛЯ НОГ С 4 НЕЗАВИСИМЫМИ КАМЕРАМИ, КОТОРЫЕ ИМИТИРУЮТ ГЛУБОКИЙ МАССАЖ СТОП, ИКР И БЕДЕР.

ПРИНЦИП РАБОТЫ AVABOOTS 5.0

Программная система пневматической компрессии создает постоянное последовательное давление на мышечные ткани подобно лимфодренажу.

Пневмокомпрессионные манжеты для ног купить стоит ради главного эффекта: 4 камеры поочередно сдавливают и расслабляют сосуды, улучшая кровообращение и ускоряя выведение токсинов и метаболитов из мышечной ткани. Такой пневматический массаж ног стимулирует доставку кислорода и питательных веществ к мышцам, создавая ощущение легкости и расслабленности.



ПОКАЗАНИЯ

- ✓ Дискомфорт и усталость после интенсивных тренировок
- ✓ Чувство тяжести, отеки ног после длительного стояния или бега
- ✓ Снижение выносливости

ОТЛИЧИЕ ОТ АППАРАТА ПРЕССОТЕРАПИИ PULSTAR PSX

Клинические аппараты прессотерапии (например, Pulstar PSX) предназначены для стационарной работы в кабинете физиотерапии: они требуют подключения к сети, имеют проводные манжеты и фиксированные программы.

AVABOOTS 5.0 – спортивная модель, ориентированная на мобильность и самостоятельное использование. Устройство полностью беспроводное, легко управляется через приложение и позволяет проводить прессотерапию спортсменов в раздевалке, отеле или дома.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация: 1 пара беспроводных сапог, зарядное устройство, рюкзак для переноски, руководство по эксплуатации.


Управление: Bluetooth через приложение (iOS и Android)

Режимы массажа: 3 программы (обычный, последовательное давление, двойная волна)


Камеры: 4 компрессионные камеры на каждую манжету

Диапазон давления: от 70 до 185 мм рт. ст

Питание: аккумулятор, зарядка до 3 часов, автономность до 5 часов

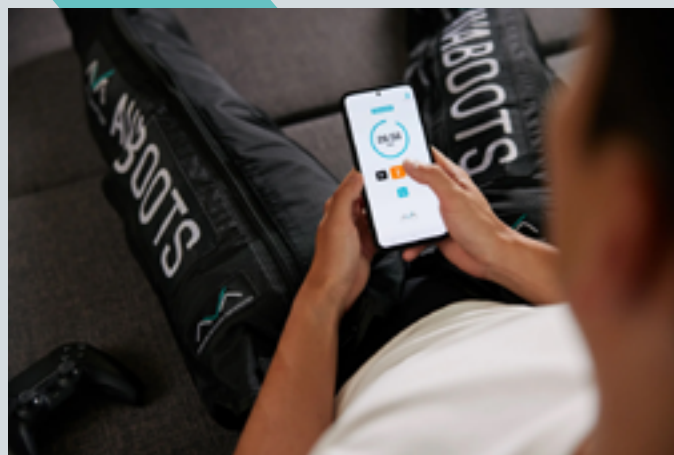

РАЗМЕРНАЯ СЕТКА

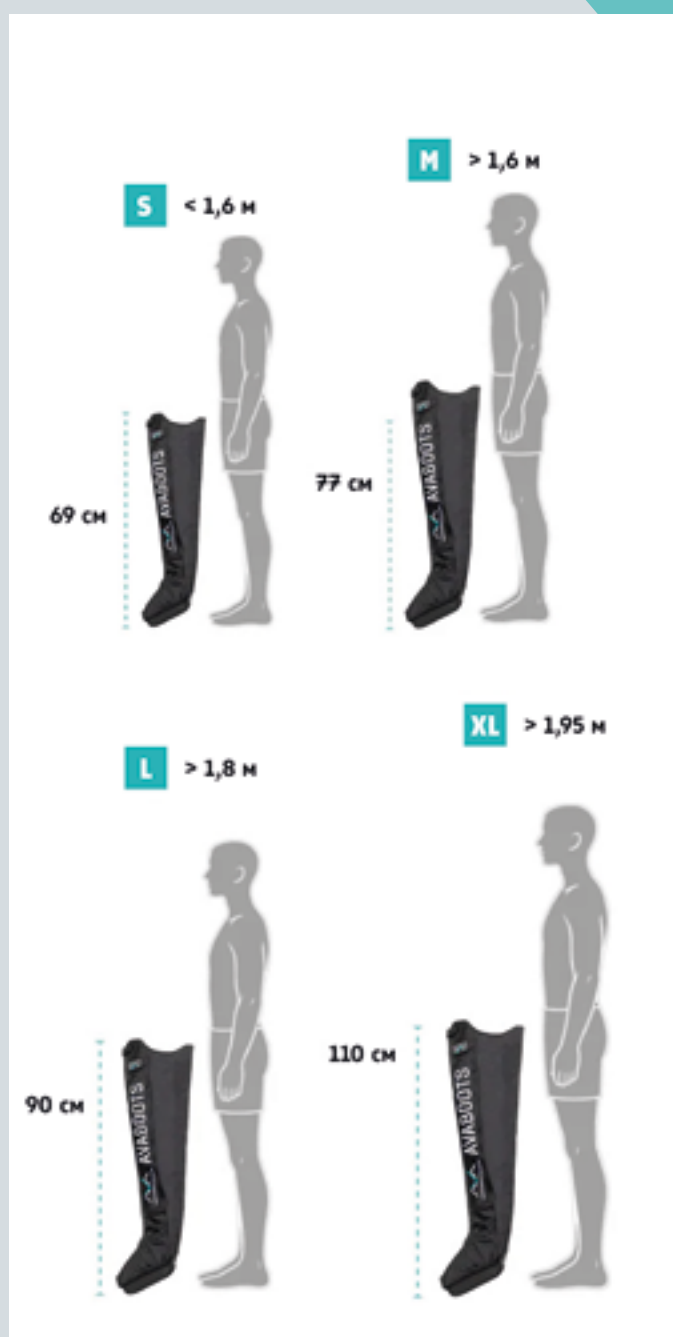

LED BOOTS BY CR7

ПНЕВМОКОМПРЕССИЯ НОГ + КРАСНЫЙ/ИК СВЕТ

LED BOOTS BY CR7 – КОМПРЕССИОННЫЕ БОТИНКИ С ФОТОБИОМОДУЛЯЦИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЕ ПРЕССОТЕРАПИЮ И СВЕТОТЕРАПИЮ.



КАК РАБОТАЮТ LED BOOTS BY CR7: СИНЕРГИЯ ДВУХ МЕТОДИК

В компрессионных ботинках с LED терапией используются **два спектра**: красный свет 660 нм – проникает в поверхностные слои, стимулирует фибробласты и синтез коллагена и ближний инфракрасный 850 нм – достигает мышц и суставов, воздействует на сосуды и кровообращение. Одновременно пневмокомпрессия создает последовательное давление от 70 до 185 мм рт. ст. в 4 камерах каждой манжеты для ног, что помогает выводить продукты распада и уменьшает отек.

ЧТО ТАКОЕ КОМПРЕССИОННАЯ ТЕРАПИЯ С ФОТОБИОМОДУЛЯЦИЕЙ


Прессотерапия с фотобиомодуляцией – метод, сочетающий механическую пневмокомпрессию и воздействие терапевтического света на ткани. Фотобиомодуляция – процесс, при котором фотоны красного света и ближнего инфракрасного поглощаются митохондриями клеток, стимулируя выработку АТФ – основного источника энергии.

Сочетание LED-терапии с компрессией дает комплексный эффект, недостижимый при раздельном применении.



ПОКАЗАНИЯ

- ✓ Напряжение и усталость после интенсивных тренировок
- ✓ Мелкие повреждения связок и сухожилий;
- ✓ Постоянные отеки и тяжесть в ногах
- ✓ Дискомфорт и припухлость в суставах и окружающих тканях

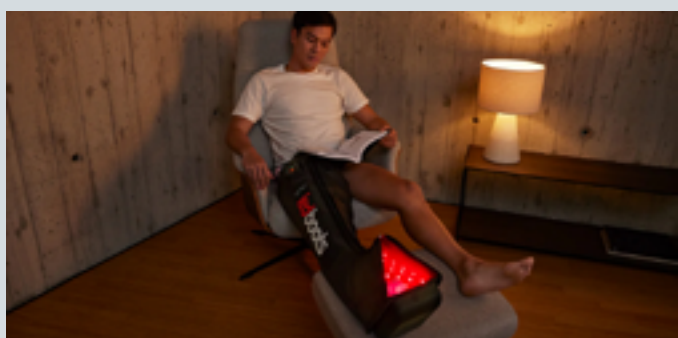

ОТЛИЧИЕ ОТ СТАНДАРТНЫХ КОМПРЕССИОННЫХ БОТИНОК

Стандартные компрессионные ботинки (например, AVABOOTS 5.0) обеспечивают только пневмомассаж и лимфодренаж.

LED BOOTS BY CR7 добавляет фотобиомодуляцию, которая напрямую воздействует на митохондрии, ускоряя синтез АТФ и восстановление.

РЕЗУЛЬТАТ

Метод ускоряет восстановление, помогая спортсмену быстрее вернуться к полноценным тренировкам. Он снимает отечность, покраснение и дискомфорт в мышцах и суставах после интенсивных нагрузок, а также улучшает кровоснабжение — рабочие мышцы активнее насыщаются кислородом и получают необходимое питание. В результате восстанавливается гибкость и снижается риск повторных повреждений.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация: пара манжет для ног, зарядное устройство, рюкзак, инструкция.

Мощность излучателя: 30 мВт (каждый спектр)

Общая мощность: 31 680 мВт

Режимы массажа: 3 (обычный, последовательное давление, двойная волна)

Управление: Bluetooth, приложение iOS/Android

Питание: аккумулятор (быстрая зарядка до 3 часов, до 10 циклов по 30 мин)





ПЕРКУССИОННЫЕ МАССАЖЕРЫ



PRO PHYSIO BY CR7

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ

PRO PHYSIO BY CR7 – ПЕРКУССИОННЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МАССАЖЕР С ПОВОРОТНОЙ ШАРНИРНОЙ ГОЛОВКОЙ, РАЗРАБОТАННЫЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СПОРТЕ.



ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО УРОВНЯ

Профессиональный массажер для мышц спроектирован для ежедневной работы в условиях спортивных учреждений. Перкуссор сохраняет стабильную мощность при 10-15 сеансах в день, позволяет работать с триггерными точками, фасциальными спайками и глубокими мышечными слоями без риска поломки или потери ударной силы.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ И ОТЛИЧИЕ ОТ ЛЮБИТЕЛЬСКИХ МОДЕЛЕЙ

PRO PHYSIO создает вертикальные ударные волны с амплитудой 12 мм и частотой до 60 Гц, что обеспечивает глубокое миофасциальное расслабление.

В отличие от любительских моделей с малой мощностью и быстрым перегревом, **PRO PHYSIO** оснащен двигателем номинальной мощностью 25 Вт и системой охлаждения, позволяющей работать часами без потери эффективности.

Поворотный рычаг с 5 регулируемыми углами наклона дает доступ к труднодоступным зонам, таким как шея, поясница, задняя поверхность бедра. Любительские модели обычно имеют фиксированную головку, что ограничивает применение.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ: СПОРТ, РЕАБИЛИТАЦИЯ, ФИЗИОТЕРАПИЯ

- ✓ Мышечное напряжение и триггерные точки
- ✓ Дискомфорт в мышцах после тренировки
- ✓ Восстановление после повреждений и затяжных нагрузок

В профессиональном спорте аппарат для глубокого перкуссионного массажа используется для подготовки мышц перед стартом и для восстановления после финиша. Процедура стимулирует кровообращение, улучшает оксигенацию тканей, что ускоряет выведение лактата и снижает мышечную жесткость.

PRO PHYSIO также показан при хронических болях в спине, шейном остеохондрозе и реабилитации после легких травм. Перкуссионный массажер для врача становится альтернативой ручной техники при работе с плотными фасциальными спайками.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мощность: 25 Вт

Аккумулятор: 2500 мА/ч,
до 4 часов работы

Зарядка: USB-C, 3 часа до 100%

Напряжение: 14,8 В

Насадки в комплекте: 6 шт

Амплитуда удара: 12 мм

ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**

MINI GUN BY CR7

ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖ

MINI GUN BY CR7 – НЕБОЛЬШОЙ ПЕРКУССИОННЫЙ МАССАЖЕР, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ БЫСТРОГО МЫШЕЧНОГО РАССЛАБЛЕНИЯ И УСКОРЕНИЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК. КОМПАКТНЫЙ КОРПУС И ДВИГАТЕЛЬ С ВЫСОКИМ КРУТЯЩИМ МОМЕНТОМ ПОЗВОЛЯЮТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ И ДАЖЕ В ПУТЕШЕСТВИИ.

ОТЛИЧИЕ MINI GUN ОТ PRO PHYSIO ДЛЯ КОГО ПОДХОДИТ КАЖДЫЙ

PRO PHYSIO BY CR7 – профессиональный массажный пистолет для специалистов, рассчитанный на многочасовую ежедневную работу. Небольшой массажер для мышц **MINI GUN** – компактная версия для индивидуального использования.

MINI GUN не требует мощного охлаждения и тяжелого аккумулятора, так как типичная продолжительность сеанса – 10-15 минут.

В отличие от PRO PHYSIO, у **MINI GUN** фиксированная головка, что снижает сложность конструкции и делает устройство более доступным.



МОЩНОСТЬ В КОМПАКТНОМ КОРПУСЕ

Устройство не занимает много места в сумке, но выдает ударную силу, достаточную для проработки основных мышечных групп. Компактный ударный массажер оснащен бесщеточным двигателем с ультра-крутящим моментом, что обеспечивает стабильную амплитуду и частоту, несмотря на малые габариты.

Несколько скоростных режимов и сменные насадки позволяют настраивать интенсивность под конкретную зону – от деликатной обработки шеи до глубокой проработки икр или квадрицепсов.



ПОКАЗАНИЯ И ЗОНЫ ПРИМЕНЕНИЯ

- ✓ Мышечный дискомфорт после тренировки
- ✓ Триггерные точки в икрах, бедрах, ягодицах
- ✓ Усталость и тяжесть в ногах после длительной ходьбы
- ✓ Стрессовое напряжение в воротниковой зоне

Перкуссионный массажер эффективен для восстановления после фитнеса, кроссфита, бега или велоспорта. Он подходит для работы с мелкими мышцами предплечья, стопы и для разогрева перед тренировкой.



ПРОСТОТА В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

1. Выберите насадку под нужную группу мышц
2. Выберите один из пяти уровней интенсивности
3. Регулируйте интенсивность во время массажа

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес: 0,5 кг

Размер: 155 × 88 × 45 мм

Ступени мощности: 6

Время работы: до 3 часов

Скорость: 900–3200 об/мин.

Насадки: 4 шт.

ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**



МАССАЖ

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ

DEEP LIGHT BY CR7


КРАСНЫЙ + ИНФРАКРАСНЫЙ СВЕТ

DEEP LIGHT BY CR7 – ИНФРАКРАСНЫЙ LED АППЛИКАТОР ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ПОСЛЕ МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ, УМЕНЬШЕНИЯ ДИСКОМФОРТА В МЫШЦАХ И ОТЕКА БЕЗ ТЕПЛОВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ.

ЧТО ТАКОЕ ФОТОБИОМОДУЛЯЦИЯ И РАБОТА LED-АППЛИКАТОРОВ

Фотобиомодуляция для спортсменов

– метод, при котором ткани облучаются светом красного и ближнего инфракрасного диапазона. Фотоны проникают через кожу и поглощаются митохондриями клеток – внутриклеточными «электростанциями».

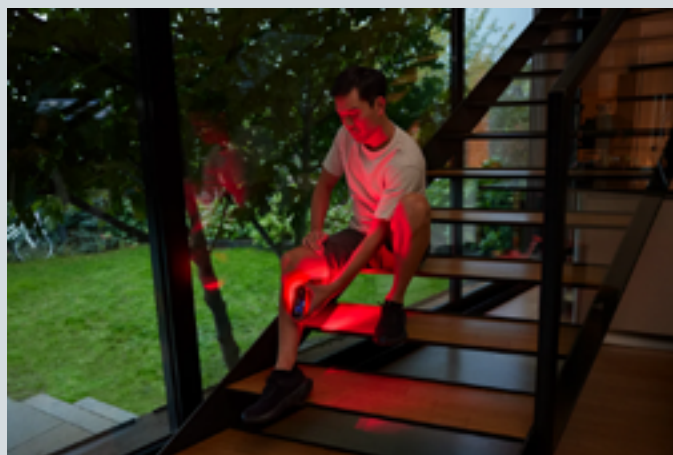

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ВОЛН ДЛИНОЙ 660НМ И 850НМ

DEEP LIGHT BY CR7 использует два взаимодополняющих спектра.

Красный свет 660 нм проникает на глубину до 8-10 мм, воздействуя на кожу, поверхностные сосуды и окончания нервов. Этот диапазон применяют для снятия местных отеков, покраснений и дискомфорта.

Ближний инфракрасный свет 850 нм проникает глубже — до 30-40 мм, проходя через мышечную ткань и капсулы суставов. Такой спектр

используют при скованности суставов, глубоком мышечном напряжении и повреждениях связок.

Комбинация 660 нм и 850 нм позволяет воздействовать одновременно на поверхностные и глубокие структуры.

Терапия красным светом аппликатором 660нм 850нм имеет регулируемую интенсивность и время экспозиции, что дает возможность персонализировать протокол.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ


- ✓ Мышечная усталость и напряжение (в том числе после интенсивных тренировок и при локальных мышечных спазмах)
- ✓ Раздражение и дискомфорт в связках и сухожилиях (локальная припухлость, болезненность при движении)
- ✓ Восстановление после повреждений (синяки, растяжения, отеки в месте повреждения)
- ✓ Скованность и дискомфорт в суставах (хруст, проблемы с подвижностью, неприятные ощущения при сгибании)
- ✓ Ограничение подвижности (суставы и мышцы с трудом сгибаются и разгибаются в полную амплитуду)

Применение **DEEP LIGHT** в спорте позволяет ускорить восстановление между интенсивными нагрузками и подготовить ткани к тренировке.

РЕЗУЛЬТАТ

В результате фотобиомодуляции запускается каскад реакций:

- ✓ Увеличивается выработка АТФ (основного источника энергии)
- ✓ Снижается оксидативный стресс
- ✓ Активируются процессы репарации

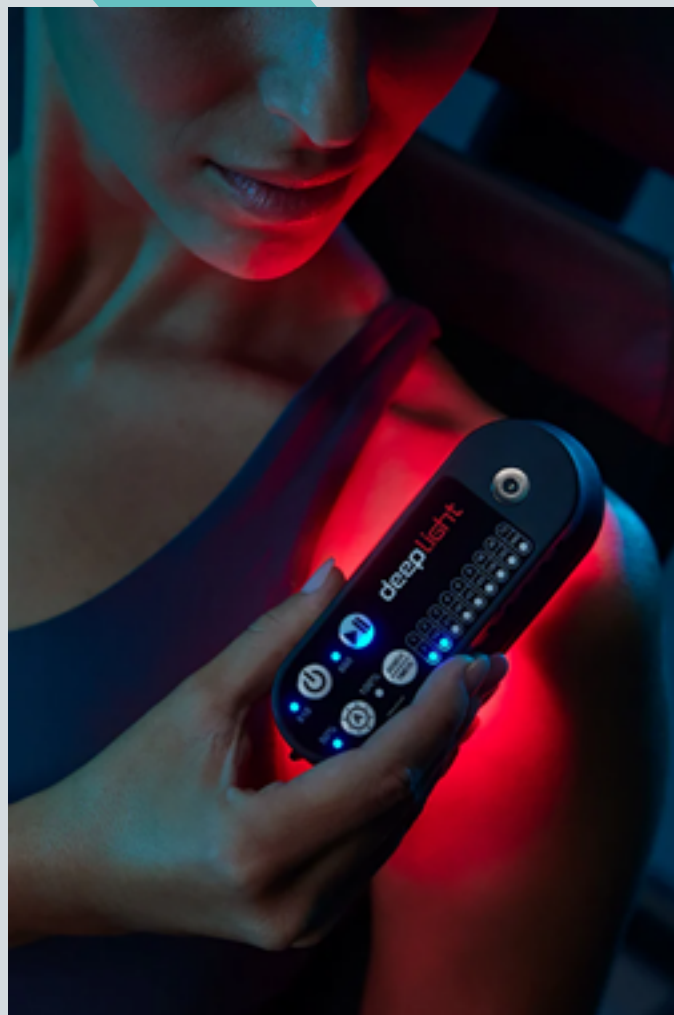

ЗОНЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Универсальный аппликатор для мышц, суставов, связок.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина волны: 660 нм / 850 нм

Тип излучателей: LED
мощностью 150 мВт

Частота: 50-60 Гц

WARM PRO BY CR7

ВИБРАЦИЯ + ТЕПЛО

WARM PRO BY CR7 – АППЛИКАТОР ДЛЯ ПОЯСНИЦЫ, СОЧЕТАЮЩИЙ РАВНОМЕРНЫЙ НАГРЕВ И РЕГУЛИРУЕМУЮ ВИБРАЦИЮ ДЛЯ РАССЛАБЛЕНИЯ МЫШЦ, ИСКЛЮЧАЯ ПЕРЕГРЕВ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ. ЛЕГКИЙ И ПОРТАТИВНЫЙ, ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОЯС ДЛЯ СПИНЫ ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМА, В СПОРТЗАЛЕ ИЛИ В ПОЕЗДКАХ.

МЕХАНИЗМ ДЕЙСТВИЯ ВИБРОТЕРАПИИ И ТЕПЛОТЕРАПИИ

Вибромассажный пояс с нагревом работает на 3 уровнях температуры (45, 50 и 55°C) и 3 режимах вибрации.

Тепло способствует расширению сосудов, поддерживая доставку кислорода и питательных веществ к мышцам. Вибрация дополняет согревающий эффект, способствуя глубокому мышечному расслаблению и уменьшению накопившегося дискомфорта.

Вибромассажер с ИК прогревом помогает подготовить мышцы к физической нагрузке и ускоряет восстановление после интенсивных тренировок. Мягкая вибрация также снимает стресс и общее напряжение, улучшая самочувствие.





РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГУЛЯРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- ✓ Мышцы меньше устают, дискомфорт после физической нагрузки снижается
- ✓ Время на восстановление после интенсивных тренировок сокращается
- ✓ Гибкость мышц увеличивается, что помогает лучше подготовиться к упражнениям
- ✓ Снижается мышечное напряжение и общий уровень стресса

ПОКАЗАНИЯ

- ✓ Дискомфорт в пояснице, вызванная усталостью, напряжением, повреждениями
- ✓ Профилактика повреждений и ускорение восстановления после тренировок
- ✓ Подготовка мышц к нагрузке (разогрев перед бегом, фитнесом, тяжелой атлетикой)
- ✓ Скованность и дискомфорт после длительного сидения или стояния

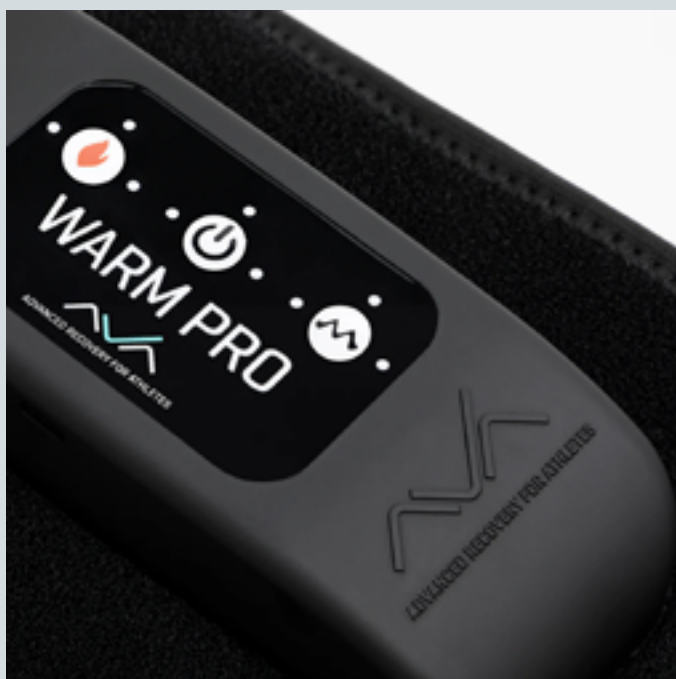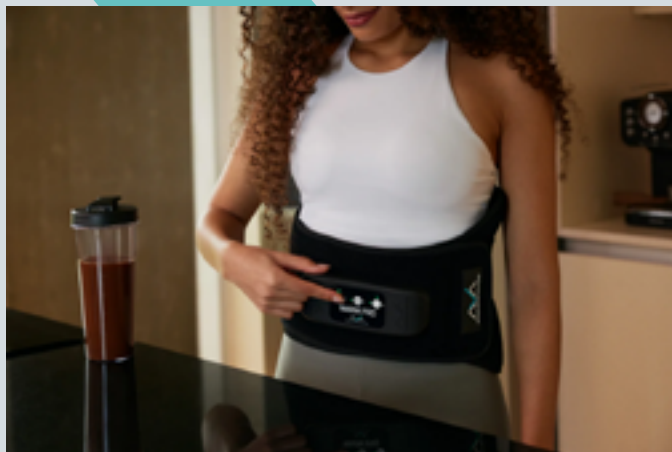

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Вес: 1,04 кг

Размеры: 118 × 27 × 3,5 см

Температура: 45°C/ 50°C/ 55°C

Вибрация: 3 уровня частоты

Время автономной работы: 2 часа



ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**

ACTIN ONE BY CR7

ЧЭНС И ЭМС

ACTIN ONE BY CR7 – ПОРТАТИВНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ МЫШЦ, ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ ТЕХНОЛОГИИ ТРАНСКУТАННОЙ ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ (TENS) ДЛЯ УСТРАНЕНИЯ ДИСКОМФОРТА И ЭЛЕКТРОМИОСТИМУЛЯЦИИ (EMS) ДЛЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЫШЦ. КОМПАКТНОЕ УСТРОЙСТВО ПОДХОДИТ ДЛЯ РАБОТЫ НА ВЫЕЗДЕ И ДОМАШНЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И ВОЗМОЖНОСТИ

Аппарат генерирует электрические токи через 2 самоклеящихся электрода, которые накладываются на кожу в проекции проблемной зоны. В устройстве заложено 144 программы, разделенные на 7 режимов, что позволяет подобрать частоту, интенсивность и длительность импульсов под конкретную задачу.

В отличие от однозадачных устройств, **ACTIN ONE BY CR7** настраивается под конкретную ситуацию: характер нагрузки, уровень дискомфорта и индивидуальные особенности спортсмена. Аппарат позволяет гибко менять параметры работы в зависимости от текущего состояния и этапа восстановления.



ДВА РЕЖИМА В ОДНОМ АППАРАТЕ

Аппарат объединяет два режима работы, которые помогают быстрее вернуться к тренировкам и поддерживать мышцы в тонусе. ЧЭНС использует низкочастотные электрические импульсы и мягко снижает дискомфорт после нагрузок и интенсивных тренировок, помогая расслабиться и восстановиться без пауз в графике.

ЭМС подает высокочастотные токи и активно включает мышцы в работу за счет ритмичных сокращений. Это позволяет поддерживать силу, улучшать амплитуду движений и сохранять форму даже в период снижения тренировочной активности.

ПОКАЗАНИЯ: ОБЕЗБОЛИВАНИЕ (TENS) И ВОССТАНОВЛЕНИЕ МЫШЦ (EMS)

- ✓ Снижение силы и выносливости после перерывов в тренировках
- ✓ Подготовка мышц к нагрузке и поддержка восстановления после нее
- ✓ Работа с мышечным напряжением после интенсивных тренировок

Аппарат нейромышечной стимуляции часто рассматривают в рамках комплексной подготовки и восстановления спортсменов. Электростимуляция помогает поддерживать тренировочный процесс и быстрее возвращаться к привычному ритму нагрузок.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Комплектация: портативный блок, 2-4 самоклеящихся электрода, провода, аккумулятор, зарядное устройство USB, инструкция.

Тип стимуляции:
TENS (нейромодуляция)
+ EMS (миостимуляция)

Количество программ: 144,
7 режимов

Количество каналов: 2

INFLATABLE BUCKET ROUND

BY CR7

ХОЛОДОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ

INFLATABLE BUCKET BY CR7 – ПОРТАТИВНАЯ ЛЕДЯНАЯ КУПЕЛЬ ДЛЯ СПОРТСМЕНОВ ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ КРИОТЕРАПИИ И УСКОРЕННОГО ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЫШЦ. КОМПАКТНАЯ, ПРОЧНАЯ И ПРОСТАЯ В СБОРКЕ, ОНА ПОДХОДИТ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОМА, В СПОРТЗАЛЕ ИЛИ ТРЕНИРОВОЧНОМ ЦЕНТРЕ.

ДЛЯ ЧЕГО НУЖНА ЛЕДЯНАЯ ВАННА

Холодовое погружение – метод криотерапии, при котором тело на короткое время помещается в холодную воду.

Метод используют для быстрого восстановления после тренировок и повреждений:

- ✓ уменьшает отеки после повреждений и нагрузок,
- ✓ снижает мышечный дискомфорт и припухлость,
- ✓ бодрит, поднимает настроение и помогает легче переносить нагрузки.



ПРЕИМУЩЕСТВА INFLATABLE BUCKET ROUND

- ✓ В сложенном виде помещается в багажник или сумку
- ✓ Надувается за 5–10 минут без инструментов
- ✓ Наполнение из шланга с добавлением льда или чиллера
- ✓ Работает дома, в клубе, на сборах
- ✓ Прочный ПВХ, простой уход

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ И МАТЕРИАЛЫ

Надувная ледяная ванна объемом 360 литров изготовлена из прочного ПВХ, который выдерживает многократную заморозку и разморозку, а также не боится механических повреждений.

Ванна оснащена мягкими комфортными краями и удобным сливным клапаном. Надувается и сдувается без специальных инструментов, что делает её удобной для выездных сборов и домашнего использования.

Для автоматической поддержки ледяной температуры можно подключить отдельный чиллер, который охлаждает воду и сохраняет заданный режим без постоянного контроля.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры: 120 × 100 × 100 см

Вместимость: до 360 литров

Материал: высококачественный ПВХ

Использование: со льдом или чиллером (не идет в комплекте)



ПРОТОКОЛЫ КРИОТЕРАПИИ В СПОРТЕ

СТАНДАРТНЫЙ ПРОТОКОЛ:

погружение в воду температурой 10-15°C на 10-15 минут.

МЕТОДИКА: окунуться до пояса или до уровня груди, исключая область сердца. Новичкам рекомендуется 5 минут при 15-18°C с последующим постепенным понижением температуры. После погружения необходимо согреться, избегая горячего душа.

ЧАСТОТА: 2-3 раза в неделю после тяжелых тренировок, а также сразу после повреждений в первые 48 часов.

CHILLER BY CR7

ОХЛАДИТЕЛЬ ВОДЫ ДЛЯ ХОЛОДНОГО ПОГРУЖЕНИЯ

ИЗБАВЛЯЕТ ОТ НЕОБХОДИМОСТИ ПОСТОЯННО ЗАКУПАТЬ И ДОБАВЛЯТЬ ЛЕД, ОБЕСПЕЧИВАЯ ТОЧНЫЙ КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СЕАНСОВ КРИОТЕРАПИИ В ЛЕДЯНОЙ ВАННЕ **INFLATABLE BUCKET BY CR7**.

ЗАЧЕМ НУЖЕН ЧИЛЛЕР ДЛЯ ЛЕДЯНОЙ ВАННЫ

Ледяная ванна эффективна для быстрого восстановления после тренировок, но поддержание стабильной низкой температуры только с помощью льда – трудоемкий процесс. Лед быстро тает, температура нестабильна, а его покупка и хранение требуют затрат.

Чиллер позволяет автоматизировать процесс: устройство непрерывно охлаждает и циркулирует воду, поддерживая заданную температуру от +2°C до +15°C на протяжении всего сеанса. Система окупается за несколько месяцев регулярного использования.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальная мощность охлаждения:
5 кВт.

Диапазон рабочих температур:
от +2°C до +15°C.

Точность: до 0.5°C

Габариты: 630×480×435 мм

Вес без воды/с водой: 43/52 кг

ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**

FOOT MASSAGER BY CR7

КОМПРЕССИЯ НОГ + МАССАЖ С ПОДОГРЕВОМ

FOOT MASSAGER BY CR7 – ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ АППАРАТ ДЛЯ МАССАЖА НОГ И СТОП СОЧЕТАЕТ КОМПРЕССИЮ, РОЛИКОВЫЙ МАССАЖ АКУПУНКТУРНЫХ ТОЧЕК И ПОДОГРЕВ. КОМБИНИРОВАННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ ПОМОГАЕТ СНЯТЬ УСТАЛОСТЬ ПОСЛЕ ТРЕНИРОВОК, РАССЛАБИТЬ МЫШЦЫ И УЛУЧШИТЬ КРОВООБРАЩЕНИЕ. УСТРОЙСТВО ПРОСТОЕ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ, ПОДХОДИТ ДЛЯ ДОМАШНЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

ПРИНЦИП РАБОТЫ И МЕТОДИКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Устройство для массажа ног и икр использует **3 методики** одновременно:

- ✓ Пневматическая компрессия мягко сжимает стопу в области подъема и пятки, что помогает снять отечность и ускорить восстановление после нагрузок.
- ✓ Роликовая система воздействует на активные зоны подошвы, расслабляя стопы и все тело.
- ✓ Встроенный подогрев усиливает приток крови к тканям, уменьшает напряжение в мышцах и помогает им быстрее прийти в норму.

Лимфодренажный массажер для ног также генерирует отрицательные ионы, которые способствуют расслаблению и восстановлению энергетического баланса.



ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

- ✓ Тяжесть и усталость в ногах
- ✓ Забитость мышц после тренировок
- ✓ Отеки стоп и голеностопа
- ✓ Дискомфорт в пятке и напряженная стопа
- ✓ Холодные ноги (даже в тепле)
- ✓ Стресс и проблемы со сном
- ✓ Подходит для восстановления после бега, футбола и кроссфита

ОТЛИЧИЕ ОТ ТРАДИЦИОННЫХ МАССАЖЕРОВ ДЛЯ НОГ

Другие роликовые массажеры для стоп дают лишь поверхностное расслабление.

Главное отличие **FOOT MASSAGER BY CR7** – комбинация компрессии, тепла и акупунктурного воздействия. Это профессиональное устройство для спорта и восстановления.

Аппарат выигрывает у бюджетных аналогов за счет точной настройки интенсивности и режимов.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Уровни интенсивности массажа: 3

Уровни компрессии: 3

Режим подогрева: 1 (отключается)

Управление: 5 сенсорных кнопок

Массаж акупунктурных точек: роликовый + воздушная подушка в области подъема

Пневмомассаж: с обеих сторон пятки

Частота: 50 Гц

Мощность: 40 Вт



ОСОБЕННОСТИ МАССАЖЕРА

- ✓ Акупрессурный массаж свода, подошвы и пятки
- ✓ Защитные подушки в области подъема стопы
- ✓ Пневмомассаж по обеим сторонам пятки
- ✓ Функция воздушного давления, нагрева и тёплой компрессии
- ✓ Функция подачи отрицательных ионов
- ✓ Съёмный моющийся тканевый чехол

ОБОРУДОВАНИЕ ОФИЦИАЛЬНО ПОСТАВЛЯЕТСЯ В РОССИЮ ДИСТРИБЬЮТОРОМ **REXAMED**

УПРАЖНЕНИЯ И АКСЕССУАРЫ





РЮКЗАК AVA

РАЗРАБОТАНО ДЛЯ ДОЛГОВЕЧНОЙ, ПРАКТИЧНОЙ И КОМФОРТНОЙ ПЕРЕНОСКИ ВАШЕГО ОБОРУДОВАНИЯ

ПОЛУСФЕРА BOSU

ИДЕАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ РАЗВИТИЯ БАЛАНСА, СИЛЫ И ГИБКОСТИ



ЭСПАНДЕР-ЛЕНТЫ

ИДЕАЛЬНО ПОДХОДЯТ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ФИЗИЧЕСКОЙ СИЛЫ, УЛУЧШЕНИЯ ГИБКОСТИ И ЗАБОТЫ О ТЕЛЕ В ЛЮБОМ МЕСТЕ



КРЕСЛО НУЛЕВОЙ ГРАВИТАЦИИ

СПЕЦИАЛЬНО СОЗДАНО ДЛЯ ГЛУБОКОГО РАССЛАБЛЕНИЯ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЫШЦ ЗА СЧЁТ ПРИПОДНЯТОГО ПОЛОЖЕНИЯ НОГ И ПОЛНОГО ОЩУЩЕНИЯ РЕЛАКСАЦИИ

АКВАБЭГ

ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ТЕХ, КТО ХОЧЕТ ПОДНЯТЬ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕНИРОВКИ НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ



РЕЗУЛЬТАТ



ИННОВАЦИИ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



REXAMED

**REXAMED — ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
БРЕНДА AVA BY CRISTIANO RONALDO В РОССИИ**



Подпишись
на ТГ-канал REXAMED

Актуальные новости
в сфере реабилитации
и спортивной медицины

info@rexamed.ru • www.rexamed.ru
+7 (800) 775-62-17 • +7 (812) 385-74-01

RM
REXAMED


ADVANCED RECOVERY FOR ATHLETES
BY CR7